

YOSHIDA

 **angelus**[®]
Japan

歯科用電動式ハンドピース

プレジジョン

E-Connect Pro

プレジジョン イーコネクト プロ



標準価格 **99,900** 円 (税別)

プレジジョン E-Connect Pro



安定した根管拡大形成
スリムヘッドで上顎大白歯部へのアクセスも容易です。軸ブレがほとんどない構造で、安定した根管拡大形成が可能。そのためレジンやトランスポーター形成のリスクを軽減します。



コードレスタイプなのに軽量。煩わしいコードのストレスなく安定したハンドリングが可能です。



コントラアングルは 340° 回転可能なので、さまざまな部位へのアクセスが容易にでき、治療時の術者のストレスを軽減します。



静音性
コンパクトサイズと静音性を両立。回転時の音が非常に静かで、患者さんに恐怖心やストレスを与えにくいです。



バッテリー
1,500mAh の大容量のリチウム電池。4 時間のフル充電で約 12 時間使用可能です。



感染予防対策
コントラアングルとスリーブはオートクレーブ滅菌可能です。(134°C で 6 分以上 乾燥工程は除く)

コントラアングル




スリーブ



素材：シリコン

実寸大

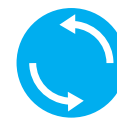

便利なトルクリバース機能
ファイル破折のリスクを軽減します。



設定したトルク値の 70% に達すると、ビープ音が断続的に鳴り始めます。



設定したトルク値に達すると、自動で逆回転します。

設定したトルク値に近づくとビープ音が連続的に早くなります。



分かりやすい画面表示
シンプルな操作で用途に応じて設定が可能です。視認性に優れた LED で、操作モード・スピードなどを確認できます。




仕様

プッシュボタン式チャック、ギア比 1 : 1
素材：ステンレス

回転数：120rpm - 1000rpm
トルク値：650 rpm 以下 0.5 - 4.0(N・cm)
651rpm 以上 0.5 - 2.0(N・cm)
回転方向：Fw (時計回り)
Re (反時計回り)

反復運動： Fw150° Re30
Fw180° Re30
Fw210° Re30
Fw250° Re30
Fw 30° Re150

※スピードは約 350-400rpm、トルクは 4.5 N・cm 設定
※トルクが 4.5N・cm に達すると、反復運動を停止し反時計回りモードに切り替わります。(Fw 30°・Re 150 は時計回りモードに切り替わります。)

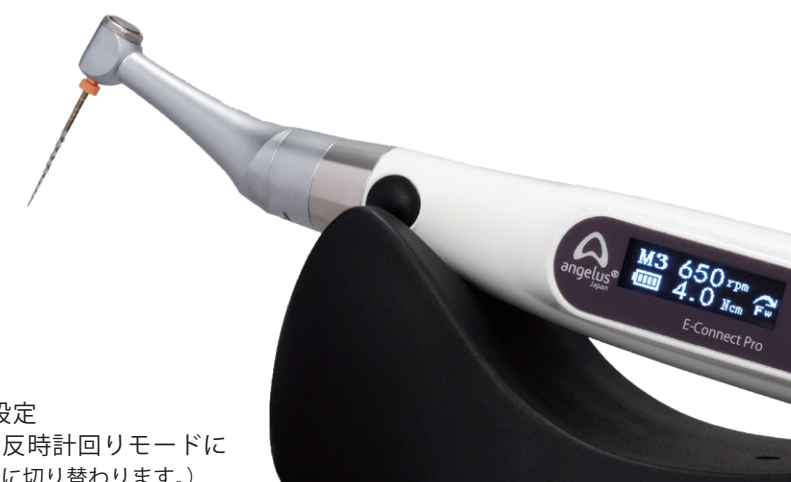

仕様



プレジジョン E-Connect Pro


セット内容：プレジジョン E-connect Pro 本体・コントラアングル・スリーブ・ハンドピースベース・スプレーノズル・アダプター（充電器）
標準価格 99,900 円（税別）

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース / 歯科用根管拡大装置
認証番号：302AGBZX00095000（管理 特管）
製造販売元：Angelus Japan 株式会社




コントラアングル

標準価格 29,900 円（税別）
※オートクレーブ滅菌可能

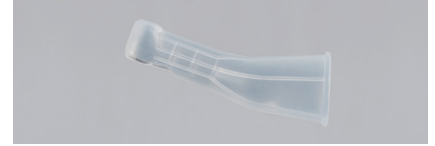

スリーブ

標準価格 940 円（税別）
※オートクレーブ滅菌可能

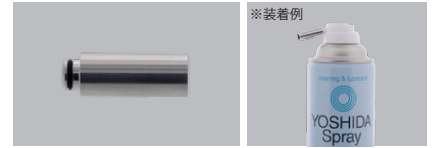

スプレーノズル（ヨシダスプレー用）

標準価格 1,400 円（税別）

関連商品

RE ファイル CT

21mm04 テーパーアソート
21mm06 テーパーアソート
25mm04 テーパーアソート
25mm06 テーパーアソート
31mm04 テーパーアソート
31mm06 テーパーアソート
セット内容：#15～#40 各 1 本入
標準価格 各 5,800 円（税別）



RE ファイル VT

21mm アソート、25mm アソート、31mm アソート
セット内容：CX・C1・C2・A1・A2・A3 各 1 本入
標準価格 各 5,800 円（税別）



RE ファイル ONE

25mm アソート
セット内容：#15～#45 各 1 本入
標準価格 8,000 円（税別）

一般的名称：電動式歯科用ファイル
認証番号：301ALBZX00015000（管理）
製造販売元：株式会社ヨシダ



バイオシーシーラー（Bio-C Sealer）

セット内容：バイオシーシーラー 0.5g × 4 本
エンドチップ S × 20 本
標準価格 10,500 円（税別）

一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
承認番号：30200BZX00263000（高度）
製造販売元：Angelus Japan 株式会社

エンドチップ S

セット内容：20 本入
標準価格 1,700 円（税別）



一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具
届出番号：27B1X00147000001（一般）
製造販売元：Angelus Japan 株式会社



RE バイオガッタパーチャポイント

02 テーパー（#15～#80、アソート）120 本入
04 テーパー（#15～#50、アソート）60 本入
06 テーパー（#15～#50、アソート）60 本入
標準価格 各 2,200 円（税別）

VT（#F1～#F5、アソート）60 本入
ONE（#S～#L、アソート）60 本入
REC（#R25～#R50、アソート）60 本入
標準価格 各 2,500 円（税別）

アクセサリーポイント（#S～#L）120 本入
標準価格 各 2,200 円（税別）

一般的名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント
認証番号：302ALBZX00007000（管理）
製造販売元：株式会社ヨシダ

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は 2021 年 8 月現在の税別価格です。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 ± 9:00～17:00
（日曜・祝祭日を除く）



(01)02747937018569

●販売元： 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野 7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>

●製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206

C02285/2021年8月/PRI/30/@40/改