




多彩なモードも簡単設定
良質で高い信頼性とデザイン


ジェラル D-Lux Pen

ディラックス ペン


波長域グラフ

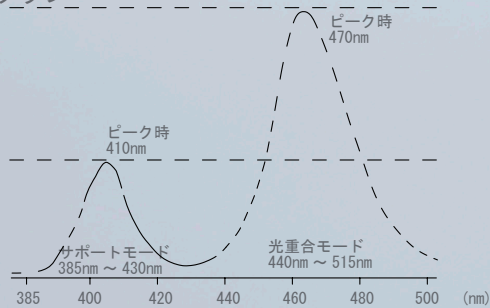

Ramp Mode (ランプモード)

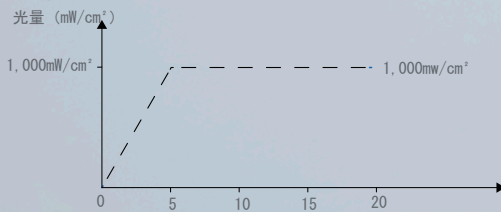

Pulse Mode (パルスモード)

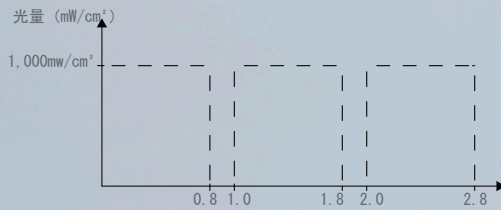

充電表示

モード表示



MO

2300 mW/cm²


03s

S

光量表示

時間表示



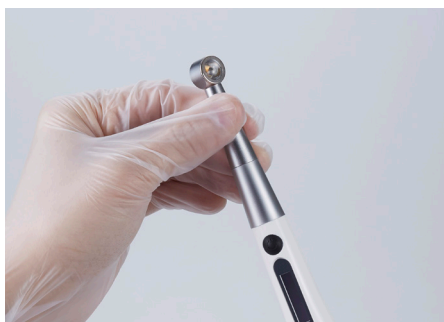

光量と波長域

光重合：440nm～515nm
2,300mW/cm²、1,500mW/cm²、1,000mW/cm²


サポートモード：385nm～430nm
600mW/cm²(サポートモード)
う蝕やクラックの視覚的な検知サポートが可能です。

360度回転

LEDヘッド部は360°回転可能でさまざまな部位に簡単に照射できます。

軽量で清潔

約100gの軽量、また優れたデザイン性により、使い勝手が良く、照射性に優れた製品です。専用スリーブで清潔な診療が可能です。

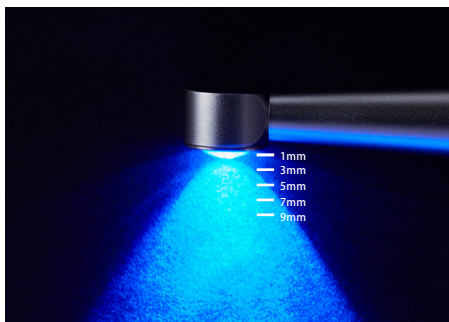

高い光直進性

照射用レンズの最適化により、光の集光性・直進性をはかり、広範囲かつ、より深部への照射を可能にしました。

優れた硬化性

φ11mmの照射部に4つのLEDを組み込む事で均一な光分布を実現しました。

ヘッド部の厚みは約9mmと薄く白歯部の照射も容易です。

安心な充電容量

フル充電には約4時間必要です。満タン時2300mW/cm²、3秒で約1,000回回の照射が可能です。

電池容量：3.7V 1600mAh
約300回の充電可能。

※バッテリーの交換も可能です。(有料)

また本機器はオートスリーブ設定が可能であり、1分、5分、10分、15分での選択が可能です。



販売名：ジェラル D-Lux Pen
一般的名称：歯科重合用光照射器（汎用歯科用照明器）
医療機器製造販売届書目番号：27B1X00147
寸法：約24×21×230（mm） 重量：109g
ACアダプター電源：100-240V 出力：DC5V/1A
波長域・光量（重合用）：440-515nm、
三種 2,300mW/cm² 1,500mW/cm²、1,000mW/cm²以上
波長域・光量（サポート用）：385-430nm、600mW/cm²
機器の分類：一般医療機器 / 特定保守管理医療機器
標準価格：45,000円（税抜） / 49,500円（税込）

関連商品・部品



アダプター
4,000円（税抜） / 4,400円（税込）



ライトプロテクター
3,500円（税抜） / 3,850円（税込）



LEDヘッド部
18,000円（税抜） / 19,800円（税込）



充電ベース
7,500円（税抜） / 8,250円（税込）



スリーブ（100枚）
1,000円（税抜） / 1,100円（税込）

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●お問い合わせは下記まで

angelus
Japan
072-657-7756

※対応時間 / 月～金 9:30～16:30
(土日祝祭日を除く)

