

ジェラル

D-Lux Pen

ディラックス
ペン


多彩なモードも簡単設定
良質で高い信頼性とデザイン



多彩なモードも簡単設定 良質で高い信頼性とデザイン




▶ 波長域グラフ

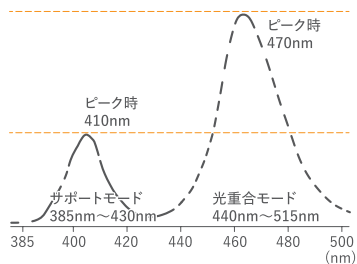


光量と波長域

光重合: 440nm~515nm 2,300mW/cm²、1,500mW/cm²、1,000mW/cm²
サポートモード: 385nm~430nm 600mW/cm²
う蝕やクラックの視覚的な検知サポートが可能です。

▶ Ramp Mode(ランプモード)

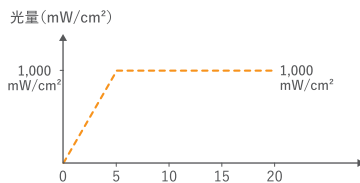

▶ Pulse Mode(パルスモード)

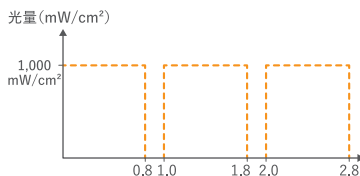


360度回転

LEDヘッド部は360度回転可能で、さまざまな部位に簡単に照射できます。




軽量で清潔

約100gの軽量、また優れたデザイン性により使い勝手が良く、照射性に優れた製品です。専用スリーブで清潔な診療が可能です。

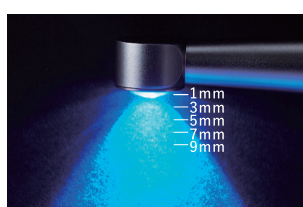

高い光直進性

照射用レンズの最適化により、光の集光性・直進性をはかり、広範囲かつ、より深部への照射を可能にしました。

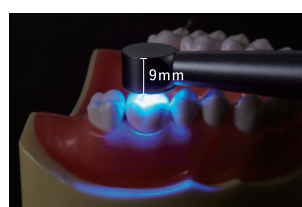

優れた硬化性

φ11mmの照射部に4つのLEDを組み込む事で均一な光分布を実現しました。ヘッド部の厚みは約9mmと薄く臼歯部の照射も容易です。



安心な充電容量

フル充電には約4時間必要です。満タン時、2,300mW/cm²3秒で約1,000回ほどの照射が可能です。またオートスリーブ機能を搭載。1分・5分・10分・15分の設定ができます。

電池容量: 3.7V 1,600mAh
約300回の充電可能
※バッテリーの交換も可能です。(有料)

関連商品・部品



アダプター
6,500円(税抜)/7,150円(税込)



ライトプロテクター
4,000円(税抜)/4,400円(税込)



LEDヘッド部
18,000円(税抜)/19,800円(税込)



充電ベース
7,500円(税抜)/8,250円(税込)



スリーブ(100枚)
1,500円(税抜)/1,650円(税込)

ジェラル D-Lux Pen ディラックス ペン

販売名: ジェラル D-Lux Pen
医療機器分類: 一般医療機器/
特定保守管理医療機器

届出番号: 27B1X00147000012

一般的名称: 歯科重合用光照射器

(汎用歯科用照明器)

寸法: 約24×21×230(mm)

重量: 109g

ACアダプター電源: 100-240V

出力: DC5V/1A

波長域・光量: 440-515nm, 三種2,300mW/cm²,

(重合用) 1,500mW/cm², 1,000mW/cm²以上

波長域・光量: 385-430nm, 600mW/cm²

(サポート用)

標準価格: 60,000円(税抜)/66,000円(税込)



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2024年9月現在のものです。

●お問い合わせは下記まで

商品ページは
こちら



angelus[®]
Japan
072-657-7756

●製造販売業: Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13-206