

 angelus[®]
Japan
CRYSTAL
OFFICE
クリスタル オフィス



軽量コンパクト・移動もスムーズな充電式ホワイトニング照射器

スムーズな操作性・デジタル表示

口腔内のアーチに合わせたヘッド部。

口腔内へのセット

照射時間の設定


照射開始 までスムーズな操作が可能です。ヘッド部に液晶パネル及び操作ボタンを集約。取りはずしができるので、メンテナンス等にも対応しやすいです。

波長域

405nm(青紫)
+
375nm(近紫外線)

デジタル表示

わかりやすい表示のため簡単に使用していただけます

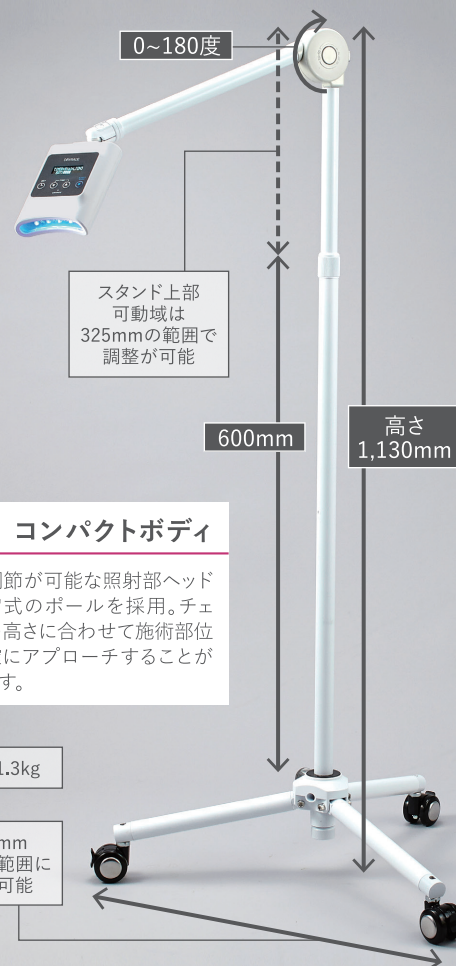

コンパクトボディ

角度調節が可能な照射部ヘッドと伸縮式のポールを採用。チェアの高さに合わせて施術部位への確にアプローチすることができます。

重量 1.3kg

440mm
四方の範囲に
設置可能

照射範囲・2種類の波長域

2種の波長のLEDを16個(各8個)搭載。コンパクトながら広がりのある照射で、多くのオフィスホワイトニング用薬材に適用します。

イメージ図

簡単な充電・コードレス

照射部ヘッドにバッテリーを内蔵しました。施術中はコードレスで使用可能です。(充電中の照射可能)
充電式の為、各チェアに簡単に移動できます。

0からフル充電…16時間
フル充電で150分間照射(20分で7回の照射)



高い収納性

診療後や使用しない際は折り畳んでコンパクトに収納。持ち運びも簡単。

CRYSTAL OFFICE クリスタル オフィス

販売名：クリスタル オフィス(CRYSTAL OFFICE)
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：27B1X00147000019
一般的名称：歯面漂白用加熱装置(31806009)
寸法：収納時730×150(mm)
重量：1.3kg
ACアダプター電源：100-120V
標準価格：250,000円(税抜) / 275,000円(税込)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2025年2月現在のものです。

●お問い合わせは下記まで

●製造販売業：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13-206

angelus[®]
Japan

072-657-7756

商品ページは
こちら

