




ジェラル D-Lux Gun

ディラックス ガン

日々の診療にスピーディな充填&安心
高機能LED照射器

 **angelus**[®]
Japan

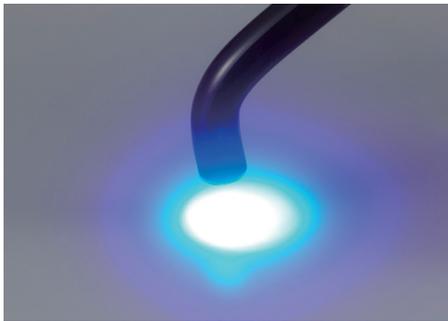

高機能照射器

状況に応じて出力 600mw/cm²~2,400mw/cm² を4段階の出力に設定することができスピード充填から熱を考慮したソフト充填も可能。いかなる場合でも対応できるように設計しました。



安心な充電容量

フル充電は約4時間。10W約3秒で400回程の照射が可能。電池容量は最大7.4V 2600mA。継ぎ足し可能なリチウム電池。状況に合わせて、コードにつなげてお使い頂けます。



球面LED搭載

LEDの冷却や放熱にはファンではなく、効率性の高い専用ヒートシンクを採用。連続使用でもオーバーヒートの心配はありません。また消費電力の低減に適しています。



多彩なモードも簡単設定

4段階の出力から選べるFastモード、重合収縮を配慮したRampモード、熱を考慮したPulseモードが設定できます。また、光量・秒数設定もボタンで簡単に行えます。



ライトガイド

光重合タイプのボンディング剤をご使用の場合は、右写真下のように根管幹部内へ照射しやすいライトガイドをお勧めしております。一般のライトガイドでは光の届きにくい根管底部まで光を供給。2mmと8mmをご用意しておりホワイトポスト、ファイバーポストをご使用の際使って頂けます。



Fast【ファストモード】

4段階の出力から選択。適材適所で600~2400mWの光量をお選び頂くことができ、通常のレジン重合は10W(3秒)複数回充填にも時間をかけません。



Ramp【ランプモード】

重合収縮を配慮し、より一層重合を確実に。設定秒数や出力も自由に、診療に応じてお使い頂けます。



Pulse【パルスモード】

熱を考慮したモードです。特に高出力で連続使用される場合は効果的です。

POWER	目安の光量	設定できる秒数1~50秒(秒数 / 硬化速度)
10W	2400mw/cm ²	1 2 3 4 5 2.6 3.6 4.0 4.1 4.2 (mm)
7W	1900mw/cm ²	5 10 15 4.0 5.0 5.3 (mm)
5W	1500mw/cm ²	5 10 20 30 40 4.0 4.2 5.4 6.2 6.7 (mm)
3W	600mw/cm ²	5 10 20 30 40 50 3.0 3.5 4.0 4.3 4.8 5.3 (mm)



ジェラルD-Lux Gun

ディラックス ガン

販売名：ジェラルD-Lux Gun
 一般的名称：歯科重合用光照射器
 届出番号：27B1X00147000013
 寸法：167×48×90 (mm) 重量：300g
 ACアダプター電源：100-120V 出力：DC9V/2.5A
 波長域・光量：420-490nm, 600-2400mW/cm²以上
 医療機器分類：一般医療機器 / 特定保守管理医療機器
 標準価格：120,000円(税抜) / 132,000円(税込)

Angelus Japan株式会社

〒567-0041
 大阪府茨木市下穂積4丁目13-107
 TEL：072-657-7756
 FAX：072-657-7856