


ジェラル

D-Lux Pen X

ディラックス ペン エックス

ハンドピースとベースを Bluetooth 接続。
診断サポートから重合まで、この一台で。



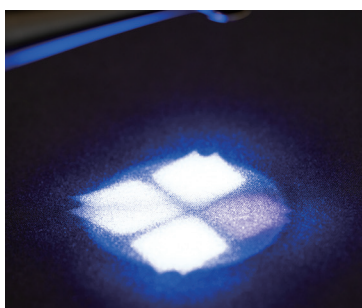

特長



65gの軽量設計



独自のレンズ設計
波長域380-515nm



360°回転可能な
8mm[※]の超薄型硬化ヘッド
※レンズ部は含みません



光量チェッカー付き充電ベース

8つの動作モード

ノーマルモード



細かな時間設定が可能なモード

時間設定: 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 40秒


ハイモード



ウルトラモードの次に高い光強度

時間設定: 3秒, 5秒, 10秒

ウルトラモード

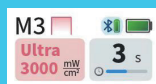

高い光強度と浸透性により、より早く硬化

時間設定: 1秒, 3秒

矯正モード



光強度が高く、光が金属ブラケットを通過して下層まで届く

1サイクル: 3秒オン / 2秒オフ
回数設定: 2回, 3回, 4回, 5回, 10回

パルスモード



発熱の防止と重合収縮を軽減

時間設定: 5秒, 10秒, 15秒, 20秒
1サイクル: 0.8秒オン / 0.2秒オフ


ランプモード



徐々に光強度が増加(最大5秒)し、収縮とマイクロリークを低減

時間設定: 5秒, 10秒, 15秒, 20秒

診断サポートモード (紫色の光)

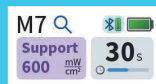

齲蝕やクラックの視覚的な検知サポートが可能

時間設定: 30秒, 60秒

診断サポートモード (白色光)



歯の内部の亀裂の検出をサポート

時間設定: 60秒, 180秒, 300秒

ジェラル D-Lux Pen X

販売名: ジェラル D-Lux Pen X
医療機器分類: 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器
届出番号: 27B1X00147000032
一般的名称: 歯科重合用光照射器 (汎用歯科用照明器)
寸法: 約17×17×210.5mm
重量: 65g
ACアダプター電源: 100-240V
出力: DC5V / 1A
波長: 380nm-515nm
標準価格: 99,000円(税抜) / 108,900円(税込)

別売オプション・部品




レンズ

用途に合わせ、先端部に装着。マグネットで簡単に取り外しが可能。

レンズ 7個/1セット
9,800円(税抜) / 10,780円(税込)

(左から) エンドガイド(長) / エンドガイド(短) / プロキシキュア・ボール(大) / プロキシキュア・ボール(小) / ポイントキュア / トランスリュウム(橙) / トランスリュウム(緑)

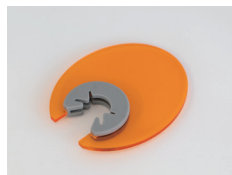

ライトプロテクター
5,000円(税抜) / 5,500円(税込)



スリーブ 100枚入り / 1箱
1,500円(税抜) / 1,650円(税込)



LEDヘッド部
27,000円(税抜) / 29,700円(税込)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2025年11月現在 消費税別です。

● お問い合わせは下記まで

● 製造販売元: Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13-206

angelus[®]
Japan

072-657-7756