



1. exe ファイル



同梱されている USB ドライブを PC へ挿入
『.exe』 のファイルをダブルクリックしてください。

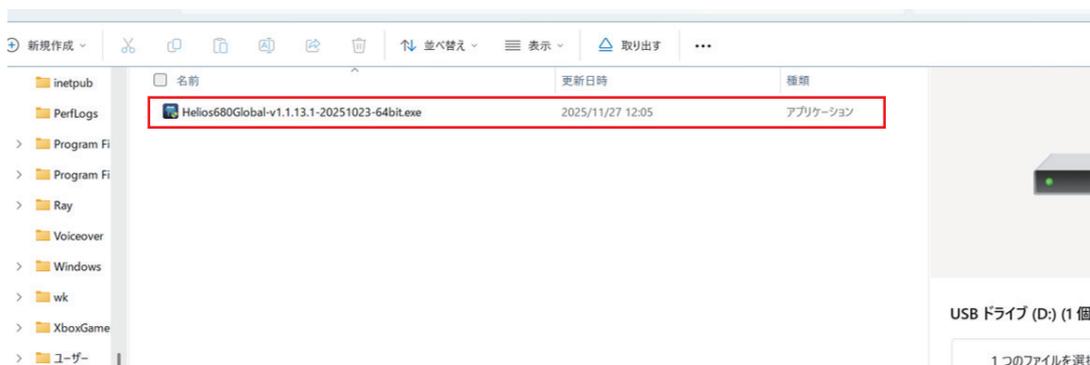


2. インストール

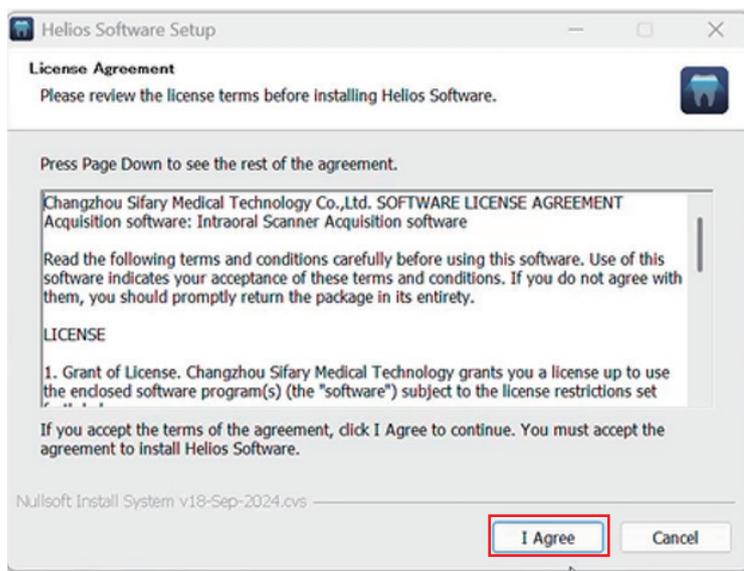


内容を確認し、よろしければ「I Agree」
をクリックします。




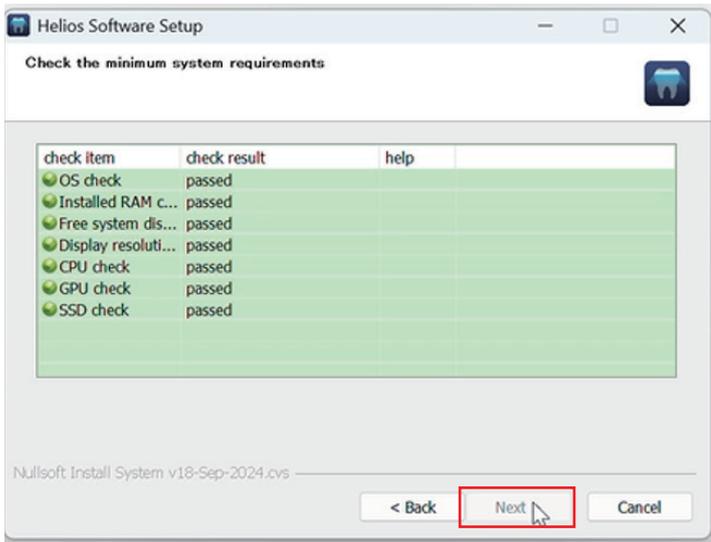


チェックが終わると「Next」が黒文字になるので、クリックします。

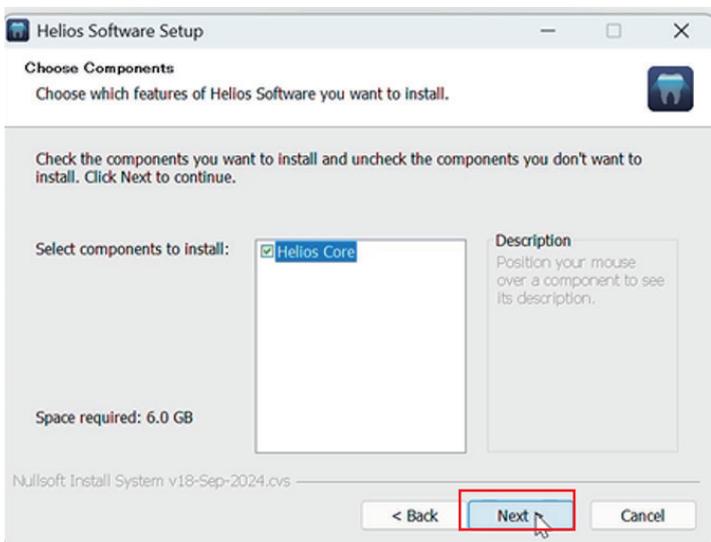


「Helios Core」を選択し、「Next」をクリックします。

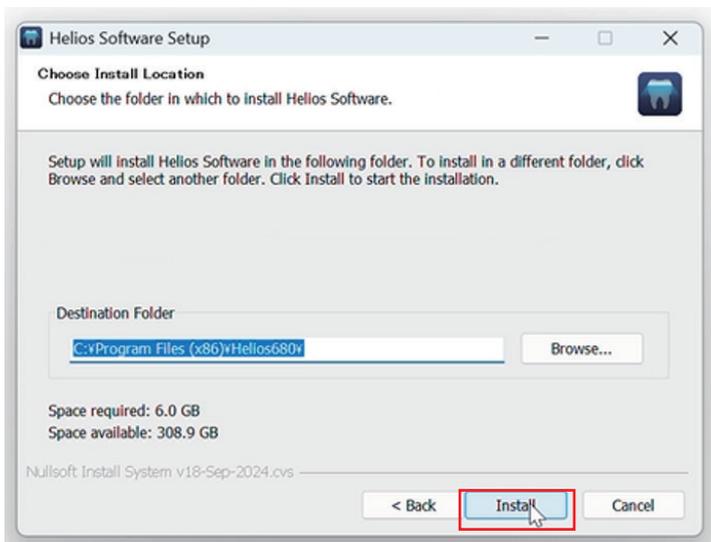

インストール先を選択し、「Next」をクリックします。

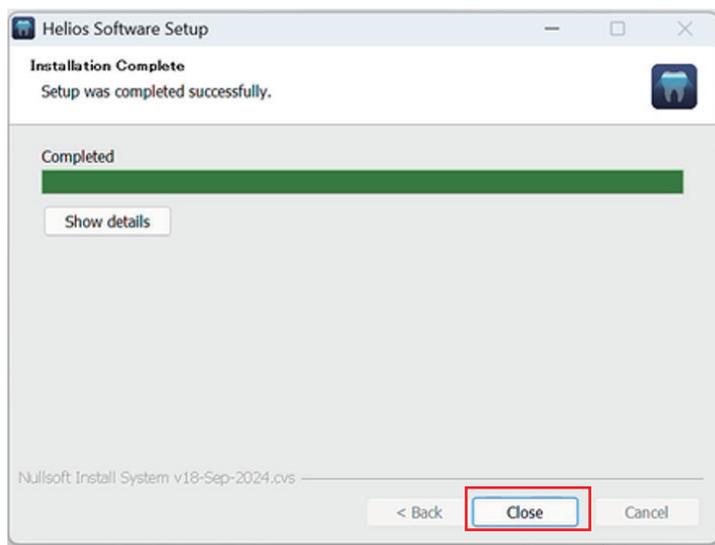

完了したら「Close」をクリックします。

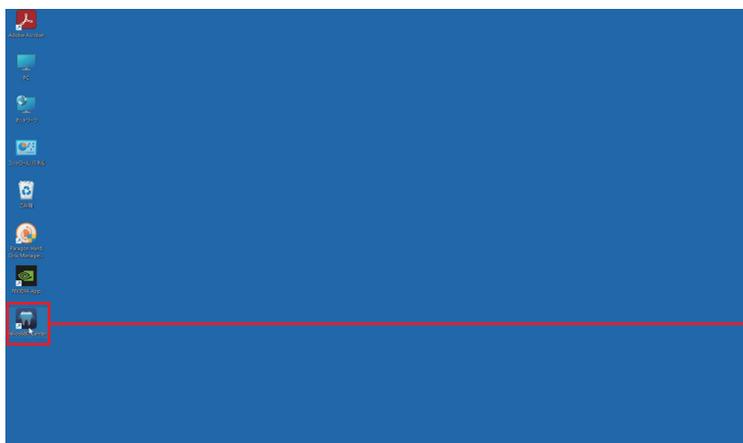

デスクトップに『Helios680 Center』を確認してください。

以上でアプリのインストールは完了しました。

NEXT →

Helios680 歯科医院用 登録・連携手順